


操作手順書

バッテリーの充電について

(電動昇降式ストレッチャー ST-410,410S 用)

本操作手順書は、取扱説明書の一部を抜粋した簡易的なものです。本製品をさらに安全に正しく使用していただくために、取扱説明書を良く読んで操作を十分熟知され、各注意事項を厳守願います。


- 1日の入浴作業前に、バッテリーのカバーの容量表示部で、バッテリーの容量を確認してください。
コンセントマークが表示されたら（容量表示 25%）、必ず充電してください。表示が 25%より少なくなると充電ができなくなります。
- 1日の入浴作業後に、必ずバッテリーの充電を行ってください。

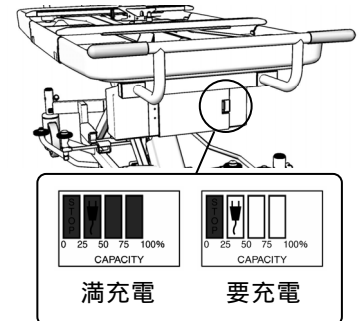


充電の方法

1. バッテリーカバーのフタを両手で持ち手前に引いて取り外します。


バッテリーカバー
フタ

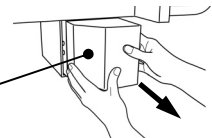


2. バッテリーのレバーを握り、そのままバッテリーを右に傾けます。
・バッテリー取り出し後は、バッテリーカバーのフタを取り付けてください。

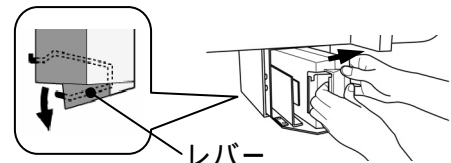


3. バッテリーを充電器に取り付け、電源プラグを AC100V コンセントに差し込みます。

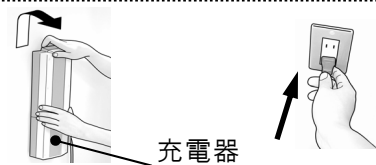

- ・緑の表示灯（ON）と黄の表示灯（CHARGE）が点灯し充電を開始します。

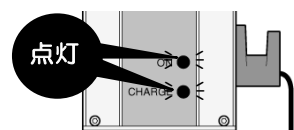


4. 充電が完了すると、黄の表示灯（CHARGE）で消灯します。満充電までは最大で約 4 時間です。

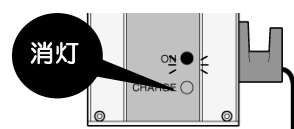


5. 充電完了後は電源プラグを AC100V コンセントから抜いておきます。



6. バッテリーカバーのフタを取り外し、ガイドに沿ってバッテリーを差し込みます。

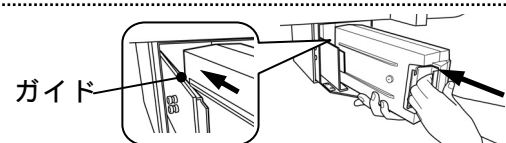

7. 奥まで差し込み後、バッテリーを左に押しつけて取り付け、バッテリーカバーのフタを取り付けます。

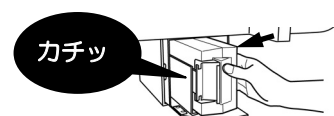

注意事項

- **1日の入浴作業終了後は、満充電（100％）まで充電すること**
充電が不十分だとバッテリーの寿命が短くなるので、黄の表示灯(CHARGE)が消灯するまで行ってください。
- **バッテリーの電極を濡らさないこと。**
感電等を避けるため、濡れた手でバッテリーの交換作業をしないでください。
- **バッテリーの電極に触らないこと。**
感電の恐れがあります。
- **バッテリー脱着時以外は、バッテリーカバーのフタを付けること**
バッテリーカバー内に水がかかると漏電の恐れがあります。
- **付属の専用充電器以外は使用しないこと**
バッテリーの充電性能や寿命に悪影響を与える恐れがあります。
- **バッテリーの残り容量に注意**
容量表示が 25%(コンセントマーク表示)になったら充電してください。
表示が 25%より少なくなると充電ができなくなります。
- **乾燥した場所で充電及び保管**
漏電等を避けるため、浴室や湿気の多い場所で充電を行わないでください。
使用後は、充電器の電源プラグをコンセントから抜いて保管してください。
- **長期間使用しない場合は、使用後に満充電にし、その後も1か月に一度は充電する**
バッテリーは自然放電するので使用しない場合でも充電が必要です。
- **長期間使用しない場合は、バッテリーを機器から外しておく**
放電量を抑えることができます。
- **充電中は充電器の表面温度に注意**
充電中は表面が 50℃位まであがりますので、やけどに注意してください。
- **差込プラグを抜く時はプラグを持って抜く**
充電器のコードを引っ張って抜くと断線し、感電やショートを起こし発火する恐れがあります。
- **バッテリーを充電器へ脱着する時や、持ち運ぶ時は、落とさないように注意**
足の上に落とすことにより、けがをする恐れがあります。